



いす式階段昇降機

自由生活

[直線型・曲線型・屋外型]



KUMALIFT

いす式階段昇降機

自由生活



階段の昇り降りが楽になる。 家族みんなの笑顔が生まれる。

お年寄りや身体の不自由な方にとって、辛く感じる階段の昇り降り。

それは、いつしょに暮らすご家族にとっても、気がかりとなっていることです。

「自由生活」は、いすに座ったまま階段を昇り降りいただける、いす式階段昇降機。

人間工学を基に生まれた快適性や操作性、危険を事前に回避する安全性、

そして 24 時間のサービス体制など、

使う人とそのご家族の気持ちになって開発されています。

みんながいつも顔を合わせられる、そしていつしょの時間を過ごせる、

そんな家族間の交流を深める環境づくりのために・・・。

「自由生活」は、みんなの気持ちをつなぐ“かけ橋”となって、

笑顔の絶えないご家庭づくりを実現します。

index

■ 共通仕様	P03-04
■ 自由生活ラインナップ	P05
■ 直線型	P06
■ 曲線型スタンダード仕様	P07
■ 屋外直線型	P08
■ 屋外曲線型	P09
■ シートカラー	P10
■ オプション	P11-14
■ 設置事例	P15-16
■ 直線型 据付図	P17-18
■ 曲線型スタンダード仕様 据付図	P19-20
■ 屋外直線型 据付図	P21-22
■ 屋外曲線型 据付図	P23-24
■ クマリフトの3つの約束	P25
■ ネットワーク	P26

安全、安心、そして優しさ。3つのコンセプトを、

安心感が高まる、確かな安全性。

座ることで操作が可能になる、「着座」スイッチを標準装備。

座るときに、間違って操作ボタンに触れてしまっても作動しません。きちんと座ってはじめて操作ができる設計ですので、誤動作が無く安全です。



障害物にあたると自動停止。

階段の上やレールのすき間に障害物などがあたるとすぐに自動停止する安全設計です。



電源はカギ管理が可能。

小さなお子様のおられるご家庭でも、間違って電源を入れてしまう事の無いよう「入」「切」をカギで管理します。



巻き取り式の「安全ベルト」を装備。

簡単に装着でき、最後まで巻き取れるベルトですので、レールに巻き込まれず安全です。



※写真は直線型です。

上階側でいすが回転。安全・スムーズな乗り降りを実現。

乗り降りの安全性を考え、上階側でいすが回転します。狭い廊下でもいすが回転しますので、スムーズで安全な乗り降りを行えます。



※写真は直線型です。

安全のポイント!

上階側でいすが回転し、乗り降りしている状態では、いすの昇降はできない機構となっています。

- 上階側でのいすの回転角度
- 直線型: 60度・90度
 - 曲線型: 60度
 - 屋外直線型: 60度・90度
 - 屋外曲線型: 60度

直線型 straight line
曲線型 curve line
屋外型 outdoor

高い次元でカタチにしました。

使いやすさを考慮した、優れた操作性。

操作しやすい大型操作ボタンを採用。

色弱の人でも分かりやすい視認性を高めた大型ボタンは、指でも手のひらでも操作できます。ボタンを押すと点灯・アラームで作動し、手を離せば止まる押し続け式です。間違って同時に二つのボタンを押してしまっても停止する安心設計です。



直線型・曲線型
スタンダード仕様
操作ボタン



屋外型操作ボタン

スムーズに折り畳め、収納もコンパクト。

使用しない時、座面を上げるとひじ掛けと足置き台が同時に折り畳め、コンパクトに収納できます。



※写真は直線型です。

ボタン1つでいすを移動、「呼び」「送り」ボタン。

階段上下階に標準装備される「呼び」「送り」ボタンは、乗りたい場所にボタン1つでいすを移動でき便利です。



使われる人の心地よさを考えた、快適性。

静かで快適、省電力運転。※当社比

インバータ制御方式の採用により、運転音が気にならず、スムーズで安全な動き出し、省電力を実現しました。

人間工学に基づいた、やさしいいす形状。

自由生活のデザインは人間工学に基づいた設計です。程よい座り心地、リラックスした理想的な角度を実現した背もたれなど、使われる方の気持ちに立ったデザインです。


ゆとりの積載量。

積載量は100kgに対応しています。

設計時に座面の高さを3段階で選択可能。

使われる方の体型に、フィットするよう、設計時に足置き台の高さを3段階(38cm、41cm、44cm)で調節ができますので、違和感無くご使用いただけます。

※人が座った状態で、座面が沈み込んだ位置での参考数値です。

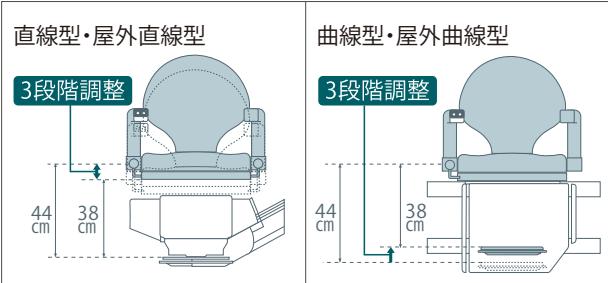

階段に合わせて、「自由生活」は
選べる4つのスタイルをご用意しています。



straight line

直線型

- 定員1名
- 運転速度/分速6m
- 有線式電源



curve line

曲線型

- 定員1名
- 運転速度/分速6m
- バッテリー式電源



outdoor

屋外直線型

- 定員1名
- 運転速度/分速6m
- 有線式電源



outdoor

屋外曲線型

- 定員1名
- 運転速度/分速6m
- バッテリー式電源



スムーズで安全な乗り降り

上階側で到着時、乗降車時の安全性を考え、いすが60度、90度の2段階で回転します。狭い廊下でもいすが回転しますので、スムーズで安全な乗り降りを行えます。

※上階側でいすが回転し、乗り降りしている状態ではいすの昇降ができない、安全機能を搭載


※写真は90度回転しています。



上階側で、いすが2段階回転(60度・90度)し、安全・スムーズな乗り降りを実現

安全性を考えて、移動速度は2段階。

人が乗っていない状態では、より早く「呼び」「送り」ができます。人が乗ると、安全な速度で移動できるよう、移動速度を考えています。

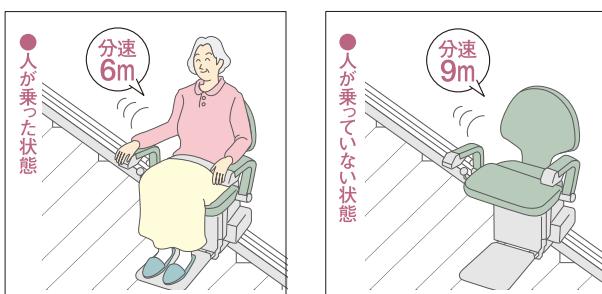


まっすぐな階段に設置できます。
レール幅の薄いコンパクト設計。

壁から10cmのレール幅。

スリム設計だから省スペース。

家族みんなが不具合を感じることのないよう、レール幅を壁から10cmとスリムに設計しております。階段スペースを広く使えることで、安全で快適にご利用いただけます。

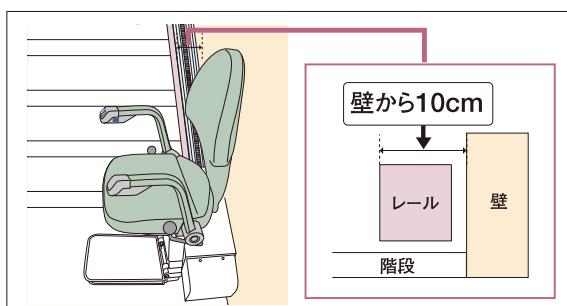

どんな空間にもなじむ ブロンズカラーのアルミレール。

どのようなご家庭の階段壁にも違和感が無く、品位を損なわないブロンズ色を採用しました。



！ご注意 -

1,000m以上の高地での設置の場合は別途、ご相談下さい。



※写真は外回りです。

バッテリー残量が ひとめでわかる表示灯付き。

バッテリーの残量が減ると、黄色のランプが点灯します。ひとめでわかる表示になっていますので、使用途中で急に停止する心配なく、安心してご利用いただけます。

バッテリー残量
注意ランプ




写真はバッテリーが
減っている状態です。

速度切替
スイッチ



写真は「静かモード」です。

速度は2段階、「静かモード」をご用意。
通常は分速6mの速度ですが、音が気になる深夜や、動きが速いと感じる方には、速度が分速3mと2段階で切替できる、「静かモード」をご用意しています。(SW切替式)

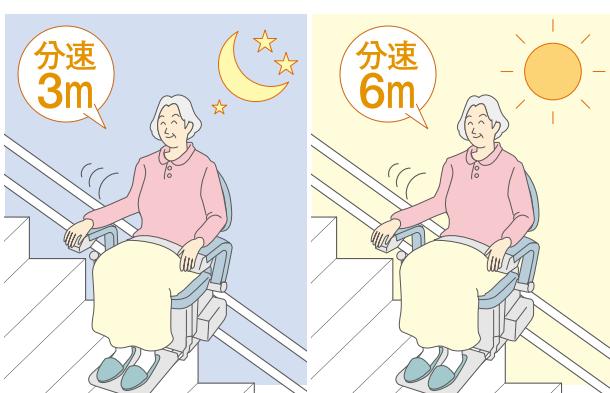

速度切替スイッチで2段階速度を切り替え

曲がった階段に設置でき、
様々な階段形状に対応。

お手入れ簡単、丸型パイプ式アルミレール。

階段の内、外どちらにも設置できるアルミレールで、自由なレイアウトを実現しました。丸型パイプ式のアルミレールは品位を損なわない質感で、どのようなご家庭の階段壁にも違和感がありません。さらに丸型の形状は、お掃除も簡単です。



！ご 注意

1,000m以上の高地での設置の場合は別途、ご相談下さい。



折り畳み時の収納がよりコンパクトに!


従来の屋外直線型と比較して、約10cm

コンパクトになりました。



様々な気象や天候にもしっかりと対応。

暴風雨相当の雨や気温変化の激しい状況(-10°C~40°C)、
強風注意報が発令される(10m/秒)レベルにも対応。

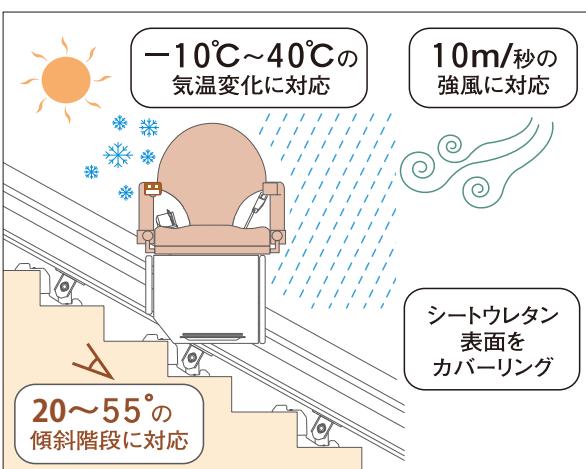

①ご注意

以下の状況では、使用しないで下さい。

- ◎ 気象情報で大雨警報が出た場合
- ◎ 浸水した場合
- ◎ 気象情報で強風注意報が出た場合
- ◎ 製品に付着した水分等が凍結している恐れがある場合

お手入れも簡単で
収納もコンパクトに。
リニューアルして新登場。

ゴミが溜まりにくいレール形状。

レール溝にゴミが溜まらないよう、お掃除板も
装着しました。また、ベルト式チェーンカバー
装着でチェーン部分へのゴミ侵入も防ぎ、お手
入れも簡単です。



ゴミがたまりにくいレール形状



お掃除板



ベルト式チェーンカバー



屋外カバーを標準装備。
使用しない時、雨、風、ほこりから
本体を守る、屋外カバーを
標準装備しています。



以下のケースでは別途、ご相談下さい。

- ◎ 豪雪地、寒冷地等への設置
- ◎ 1000m以上の高地への設置
- ◎ 腐食性ガスや蒸気がある場所、又は沿岸地への設置


outdoor

屋外曲線型



様々な気象や天候にもしっかりと対応。

暴風雨相当の雨や、気温変化の激しい状況(-10℃～40℃)、強風注意報が発令される(10m/秒)レベルにも対応します。

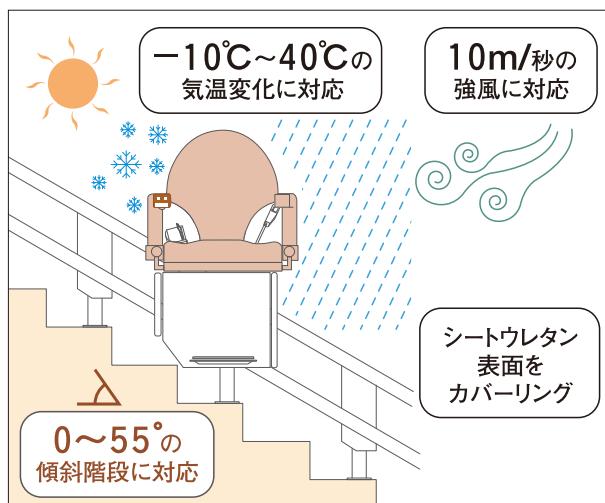


水が染み出さないようシートの内部ウレタンにカバーリング。

シートのファスナー部などから水が浸入しても、ウレタン表面にカバーを施しているので、水が染み出す心配はありません。

様々な天候にも対応。
外出時や帰省を快適に
サポートします。

屋外カバーを標準装備。

使用しない時、雨、風、ほこりから本体を守る、屋外カバーを標準装備しています。

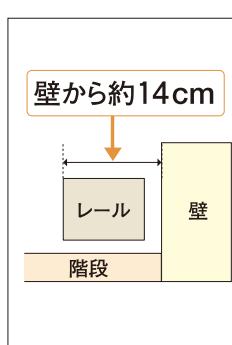

省スペース、 急傾斜の階段にも対応。

壁からレールまで、約14cmとコンパクト。屋外曲線型が設置できる階段の傾斜角度は0～55度で、ほとんどの階段に設置できます。



お手入れ簡単、 丸型パイプ式アルミレール。

高級感のあるアルミレールは、表面にアルマイト処理を施していますので、エクステリアを損ないません。屋外での使用を考慮し、チェーンをレール内に収納し、直接雨風がかからず、丸型パイプ形状でお掃除が簡単です。

①ご注意

以下の状況では、使用しないで下さい。

- ◎ 気象情報で大雨警報が出た場合
- ◎ 浸水した場合
- ◎ 気象情報で強風注意報が出た場合
- ◎ 製品に付着した水分等が凍結している恐れがある場合

以下のケースでは別途、ご相談下さい。

- ◎ 豪雪地、寒冷地等への設置
- ◎ 1000m以上の高地への設置
- ◎ 腐食性ガスや蒸気がある場所、又は沿岸地への設置

インテリアに合わせてお選びいただけるように、
多彩なカラーをご用意しています。

[直線型・曲線型スタンダード仕様]

ビニールレザー素材



ビニールレザー素材



メッシュ素材



ビニールレザー素材

屋外型



※階段形状によっては対応できない場合がございます。
ご計画の際はご相談下さい。

快適な移動環境をさらに充実させるオプションをご用意しています。

マーク例 直線 直線型



曲線 曲線型スタンダード仕様



屋外直線 屋外直線型



屋外曲線 屋外曲線型

直線 曲線 屋外直線 屋外曲線

ペンダントスイッチ

いすの操作ができない方を介助者が昇降させる時、身体をささえて運転しないといけない場合もあります。「ペンダントスイッチ」は、介助者が身体をささえながら昇降できる、操作ボタンです。



直線 曲線 屋外直線 屋外曲線

レバースイッチ

操作ボタンが押せない手の不自由な方でも操作しやすい、レバー型の操作スイッチです。



直線 曲線 屋外直線 屋外曲線

乗場操作盤キースイッチ


複数の方が使用される施設などでは、使用時の管理が大変です。この「乗場操作盤キースイッチ」はカギで管理できますので、誤操作や事故を防止できます。



屋外直線

ひじ掛けオプション

身体の不自由な方や、お年寄りの方がスムーズで安全に乗り降りいただけるよう、ひじ掛けの折り畳みが大きくなり、乗降スペースが広がります。

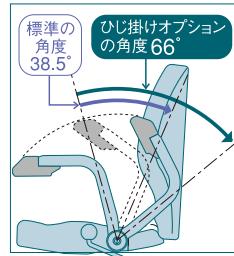

[曲線型] のみのオプション

曲線 屋外曲線

途中階給電

上階、下階の給電位置に椅子を停止させておけない階段には、階段途中で給電できる「途中階給電」機能をご用意しております。

曲線 屋外曲線


バッテリー容量が増えて安心の 「補助バッテリー」

使用頻度の高い施設などや階段距離の長いご家庭では、バッテリー容量に余裕のある「補助バッテリー」をご用意しております。通常の2倍、3倍からお選びいただけます。(要相談)

曲線 屋外曲線

昇降中は音楽でお知らせする 「走行中メロディ」機能

「呼び」「送り」の操作や昇り降りの際には、メロディで昇降中であることをお知らせします。

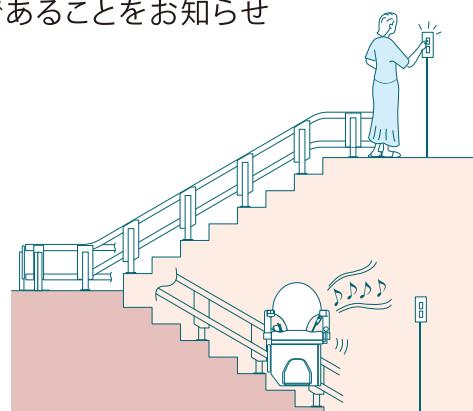




電動回転シート仕様




上階への移動を
ワンステップで可能にする
オプションです。


「電動回転シート仕様」は、乗ってから降りるまでの間、
手元のボタン一つを押すだけの簡単操作が可能になります。

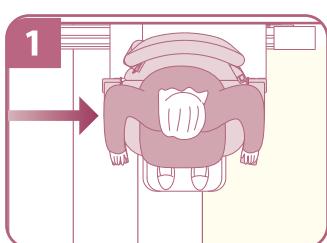

操作ボタンの進行方向側ボタンを押し続け上階側にいすが昇ります。到着すると到着音が鳴り、自動的に止まります。

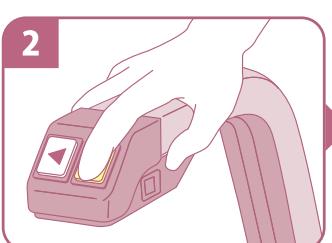

さらにそのまま操作ボタンを押し続けます。

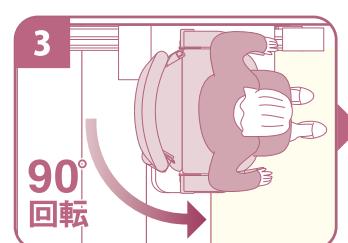

警報が3回鳴りシートが進行方向に90°回転します。停止するまで回転させると、停止音が鳴り停止します。

いすがフロア踊り場方向に向き、安全にスムーズに乗り降りできます。

①ご注意

快適にご利用いただくために。

- ◎ ひじ掛けに正しく手を置いて下さい。
シートが回転する際に壁や手摺等に手を挟む恐れがあります。
- ◎ 回転中は停止するまで正しい姿勢を保持して下さい。
回転中に手や体を乗り出しますと壁にぶつかりけがをする危険性があります。

次の方の操作はご遠慮下さい。

- ◎ 触覚、痛覚に障害のある方
- ◎ 操作ボタンをご自身の意思で操作する身体能力のない方
- ◎ 操作を十分に理解できない方

座面高さについて


◎ 電動回転シート仕様を選択頂いた場合、P.04に記載されております座面の高さが41cmと44cmのみの対応となります。



「廊下がスッキリ」という、
家族へのやさしさを形にしました。



**階段の下階側でレールを折り畳みできる
「折り畳みレール仕様」は、人の通行やドアの開閉を防げません。**

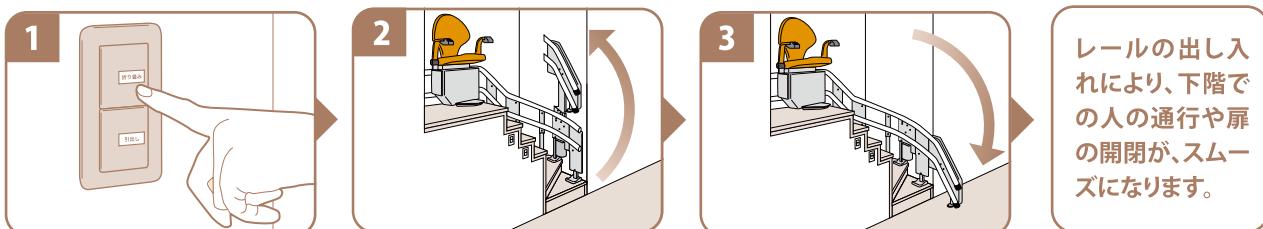

下階にある折り畳みボタンを押し続けます。レールを折り畳む為にいすは自動で待機位置に動きます。

警報が3回鳴った後、レールの折り畳みが開始されます。レールの折り畳みが完了すると停止音が鳴り停止します。

「自由生活」を使用する時は引出しボタンを押し続けます。レールの引出しが完了すると、停止音が鳴り停止します。

レールの出し入れにより、下階での人の通行や扉の開閉が、スムーズになります。

！ご 注意

快適にご利用いただくために。

- ◎ 折り畳みレールの動作範囲に人や物が無い事を確認して下さい。
使用する際に動作範囲に人や物がありますと、はざまれケガをしたり機械の破損といった事故の原因となります。
- ◎ 折り畳みレールの動作部分に注意して下さい。
折り畳みレールを途中で止めたまま放置しますと、ぶつかりケガをしたり、機械の破損の原因となります。またレールのジョイント部分の先端は手や衣服を傷つける恐れがありますので触れない様にして下さい。

次の方の操作はご遠慮下さい。

- ◎ 操作ボタンをご自身の意思で操作する身体能力のない方
- ◎ 操作を十分に理解できない方

設置に関するご注意

折り畳みボタンは、安全上、下階側にのみつきます。

- ◎ 階段形状によっては設置が困難な場合があります。
詳しくは当社営業スタッフにお問い合わせ下さい。



直線



曲線

ひじ掛けフラット仕様

ワンステップでひじ掛けと座面が連動し、

邪魔にならない位置まで移動します。

乗降スペースが広がることはもちろん、折り畳み時もよりコンパクトに!

乗り降りしやすい!

ひじ掛けが邪魔にならない位置まで折り畳まれるので、乗り降りの際、安心してご使用いただけます。



標準仕様



ひじ掛けフラット仕様



車いすからの移乗もらくらくに!

スムーズに折り畳める!

座面をあげるとひじ掛けと足置き台が同時に折り畳め、スムーズに収納できます。



カラーは専用色ブラウン(メッシュ生地)

収納もさらにコンパクトに!

使用しない時は折り畳んで、スペースを有効利用。

標準仕様



ひじ掛けフラット仕様



実際「自由生活」を設置されたお客様のお宅を拝見し 使用された感想や、設置前と設置後の比較をしてみましょう。

大阪府大東市 S様邸

ショールームで良さを体感。
「自由生活」に決めてよかったです!

洗濯物を干すため2階への昇り降りがどうしても必要なことから、いす式階段昇降機の設置を検討し始めたというS様。現在は手すりをつたって歩ける状態ですが、将来を見越して息子さんが探してきてくれたのが「自由生活」です。じつは息子さんは当初、いろいろご覧になったそうですが、

レールの出幅や価格面で満足できなかったため、クマリフトのショールームに来場されました。そして『実物を見て、実際に乗ってみることで、既に見ていた製品との違いがよくわかってよかったです』と即決。とくに装置の収まりや、細かな安全装置が気に入られたようです。『息子がすべていいようにしてくれました』と大喜びのS様。便利に使っておられるご様子で、将来の不安もなくなりいきいきと明るい表情をされていたのが印象的でした。



設置前
Before

設置機種
自由生活曲線型
グレードアップ仕様 外回り
※現在、こちらの機種の販売は終了しております。



設置後
After



埼玉県川口市 I様邸

一人で操作できるのが一番。
外出できるようになってみるみる元気に!

1階2階にテナントがあり、3階をご自宅として使われているI様。同居されているおじいさまが腰の圧迫骨折により自立歩行困難となられました。デイサービスは3階までのお迎えはできず、ヘルパーさんとお医者様の往診のみの毎日。『なんとか1階まで降りられるように』と、「自由生活」を設置されました。現在はデイサービスに行くために利用されています。設置当初こそご家族がつきそって使われていたそうですが、今では慣れて操作もお一人でされるとか。デイサービスに通えるようになってリハビリを行ったことで、平地では自立歩行もできるようになられたとのこと。『一人で操作できるのが一番!介助するほうにとってもラクだし、本人も気を遣わなくてよいからラクみたい』と奥様。『「自由生活」はお金には換え難い喜びを我が家にもたらしてくれました』とご主人。以前よりも元気になられたおじいさまのお姿を拝見でき、非常にうれしい訪問でした。

設置前
Before

設置後
After



設置機種
自由生活曲線型
スタンダード仕様
内回り

新潟県三条市 S様邸

朝晩の散歩が日課になり
生活にメリハリができました。

S様はご夫婦ふたりの生活。10年前にご主人が脳梗塞で倒れられ、階段の昇り降りが不便になられたそうです。住まいが2階のため、病院へ行くにも階段を必ず利用しなければならず、一人で昇り降りできるようにと「自由生活」を設置されました。設置前は、上階での乗降スペースが狭く、いすへの乗降ができるか不安だったそうですが、実物を体験してみてこれなら大丈夫と設置に踏み切られました。「自由生活」を使うようになってからは、『外出する機会が増えた』とお喜びのS様。朝晩の散歩が日課になり、ときには奥様と一緒に買物に出かけるなど『生活にメリハリができた』とか。またご高齢の友人が来られたときも利用され喜んでいただけたそうで、「自由生活」のある暮らしにすっかりご満足の様子です。



設置前
Before

設置機種
自由生活直線型

設置後
After



設置機種
自由生活屋外直線型(従来型)

設置前
Before

設置後
After

大阪府大阪市 H様邸


『こんな立派なものがついて良かったね』みんな笑顔で大満足!

川に囲まれ緑豊かな住宅地内にあるお宅は、1階で工場を経営されており、2階がお住まいとなっています。「自由生活」使われるご家族は、お母さまと奥さま。85歳になられるお母さまは、昼間病院やデイサービスへ通われます。奥さまはかつて脳梗塞で倒れられた経験を持ち、幸い大きな後遺症は残らなかったのですが、右足が不自由に感じられているようです。

2階からの移動は、ご主人が抱えて階段を降っていました。そこで「自由生活」の設置を考えられました。

以前からホームエレベーターや階段昇降機をご存じだったご主人は、構造やスペースの都合で設置スペースがコンパクトな「自由生活」を選ばれました。

設置されて施設の方が送迎に来る際『こんな立派なものがついて良かったね』と感心しながら眺めに来られるそうです。お母さまも安全に昇降できる「自由生活」に『大満足してるよ』と嬉しそうでした。

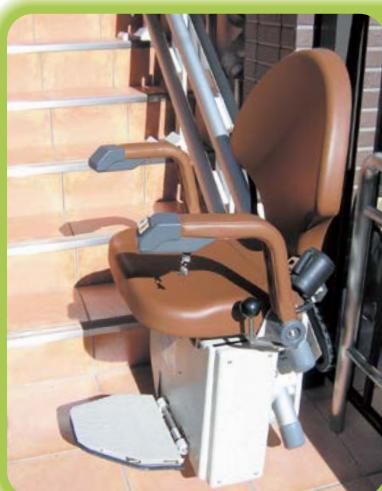


踊り場のない
直線階段


ご家庭はもちろん学校・病院や駅などの公共施設の階段に設置できます。

- 左記の図は、代表的な階段例です。
ご計画の際は、ご相談下さい。
- 下記の図は、標準仕様の場合です。


正面図

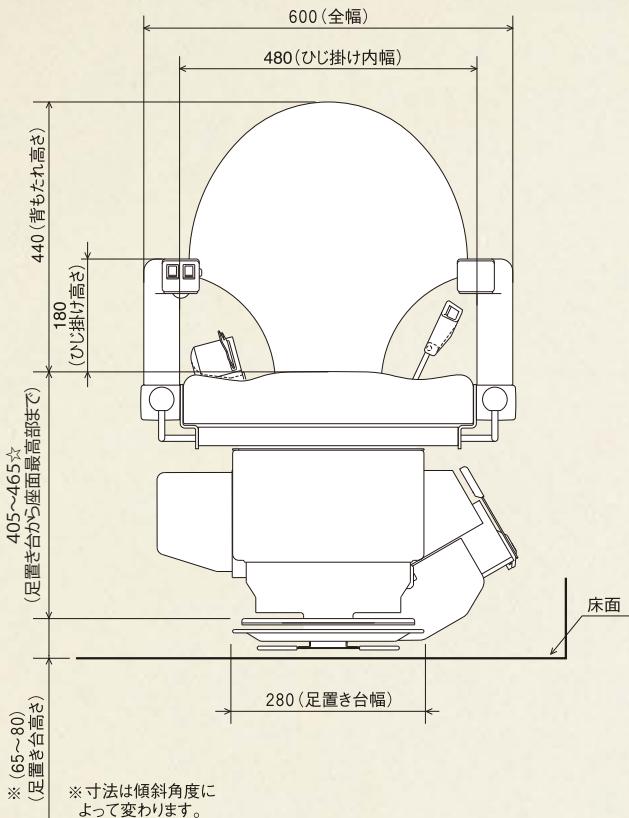

側面図

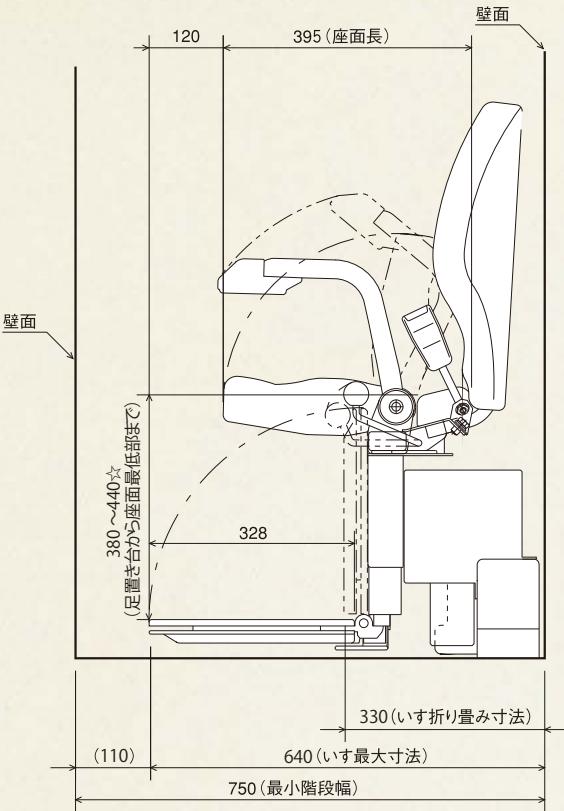


平面図

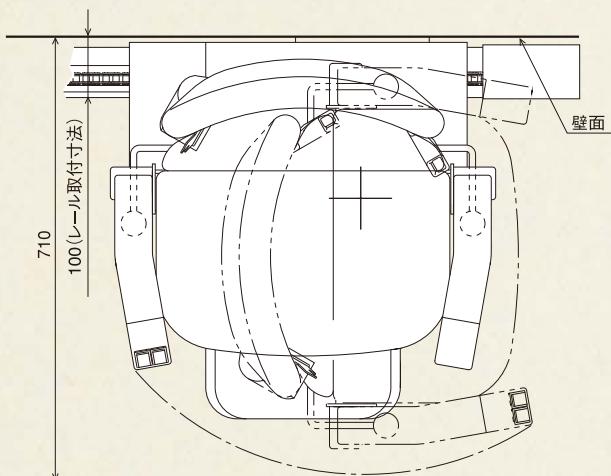

*上階側でのみ回転します。

電気工事関係

[乗場操作盤配線(埋込の場合)]

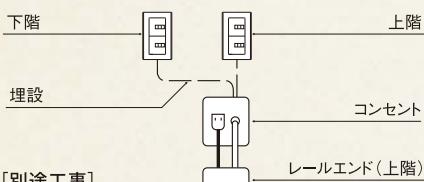

[別途工事]


1) 電源(専用電源)

電圧・周波数	単相交流101±6V 50/60Hz
コンセント	125V 15A アース・ターミナル付


専用コンセント施工例

乗場操作盤露出の場合

コンセント
125V15A
アース・
ターミナル付

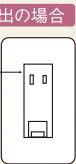


乗場操作盤埋込の場合

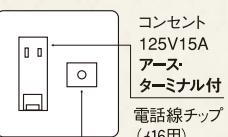


2) 階段補強(強度不足の場合)

設置平面図

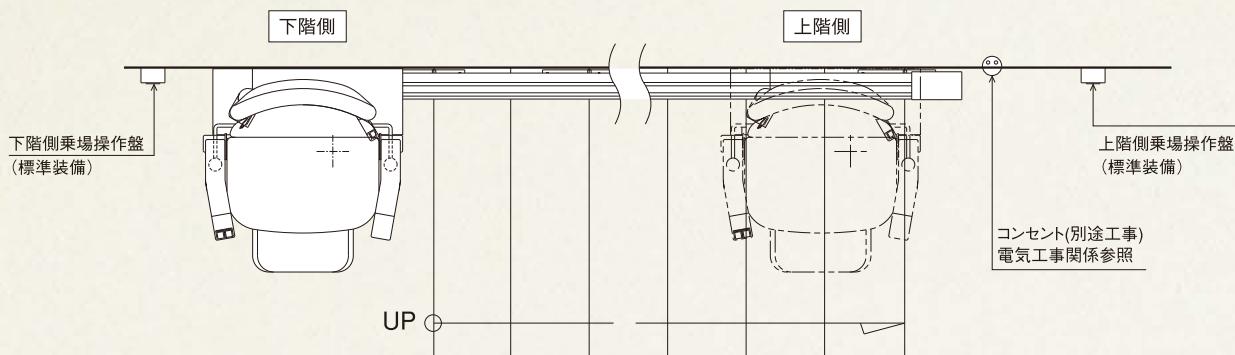

設置断面図

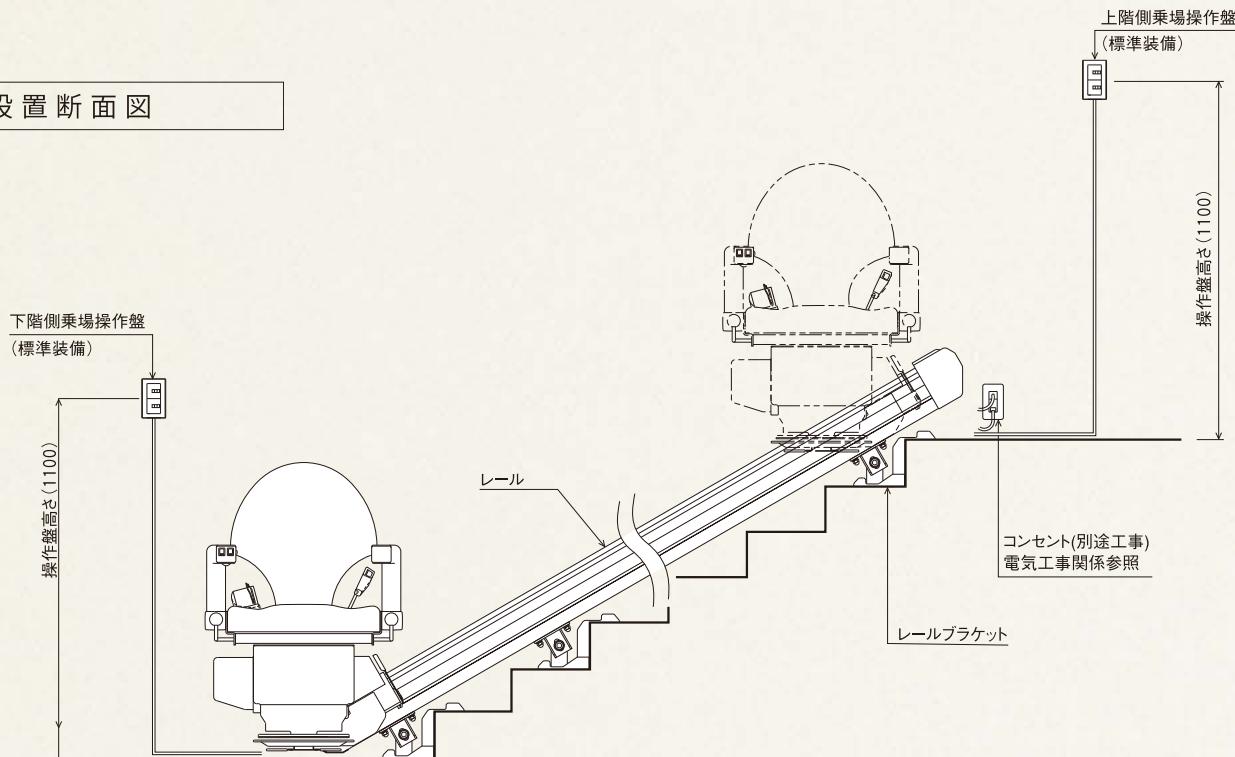

いす式階段昇降機「自由生活/直線型」仕様

定 員	1名(100kg)
速 度	6m/分(回送時9m/分)
電 源	単相交流100V(50/60Hz)
モータ容量	200W
駆動用電源	—
最大傾斜角度	55度
最小傾斜角度	30度
走 行 行 程	5m(標準)
駆 動 方 式	チェーンラックピニオン式
制 御 方 式	インバータ
レ ー ル 素 材	アルミ(アルマイト仕上げ)

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

標 準 装 置	回転シート(上階側のみ)60度、90度 ^{*1} 上下階乗場操作盤 巻き取り式安全ベルト、リミットスイッチ、ファイナルリミットスイッチ 着座スイッチ、電磁ブレーキ、キースイッチ、足置き台セーフティ チアフレームセーフティ、押し続けボタン
安 全 装 置	回転シートスイッチ、足置き台下セーフティ 過速度検出装置
オプション ^{*2}	①乗場操作盤キースイッチ ②レール延長 ③人体感知センサー(フットライト) ④ベンダントスイッチ ⑤レバーススイッチ ⑥電動回転シート ^{*3} ⑦ひじ掛けフラット仕様

^{*1}電動回転シート仕様(オプション)時は、90度のみとなります。

^{*2}階段形状によっては対応できない場合がございます。ご計画の際はご相談下さい。この他のオプションについては、ご要望に応じて検討いたします。


^{*3}電動回転シート仕様を選択頂いた場合、P.04に記載されております座面の高さが41cmと44cmのみの対応となります。

直線型の特徴は6ページをご覧下さい。

ご家庭はもちろん学校・病院や駅などの公共施設の階段に設置できます。




正面図

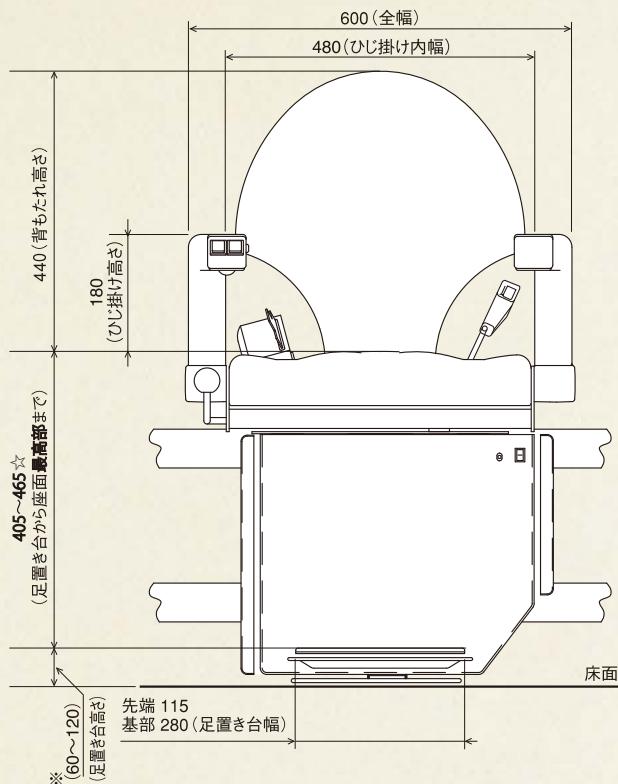


※ 設置断面図★部での寸法

☆人が座っていない状態での参考数値です。

側面図

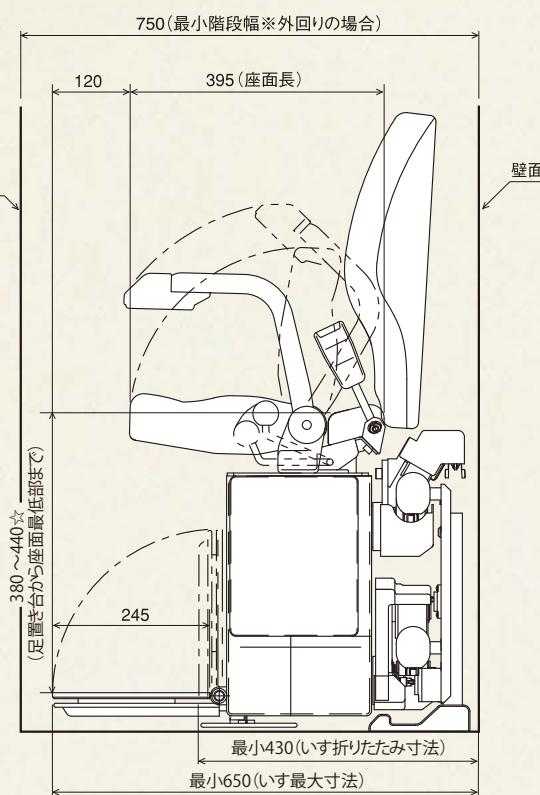


平面図

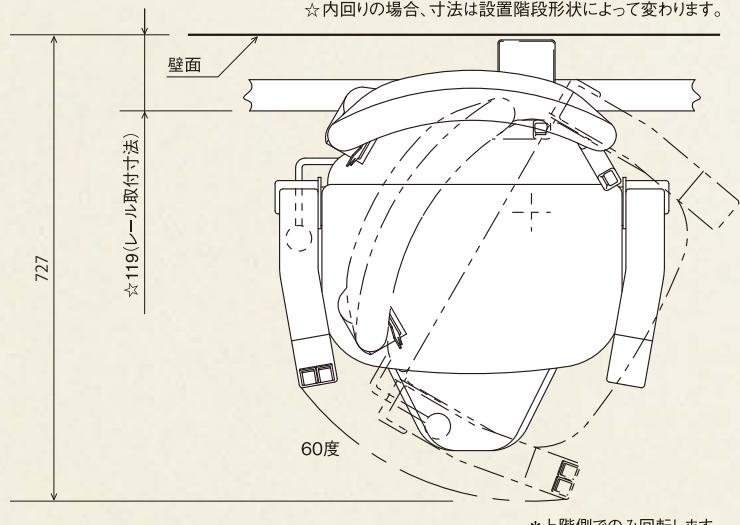

電気工事関係

[乗場操作盤配線(埋込の場合)]

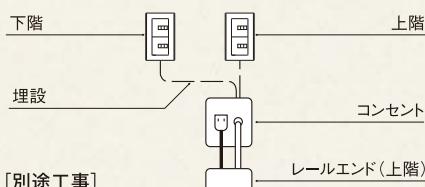


[別途工事]

1) 電源(専用電源)

電圧・周波数	単相交流101±6V 50/60Hz
コンセント	125V 15A アース・ターミナル付

専用コンセント施工例

乗場操作盤露出の場合

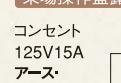


乗場操作盤埋込の場合




2) 階段補強(強度不足の場合)


設置平面図(外回り)

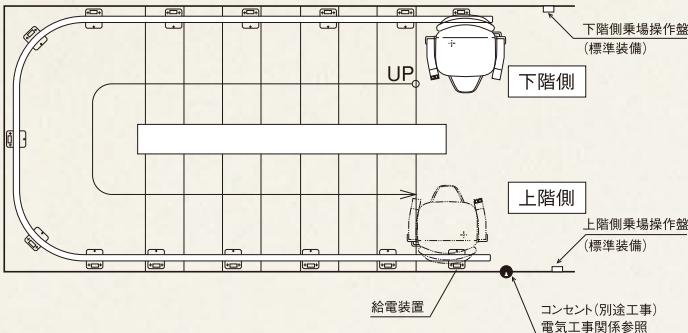


設置平面図(内回り)

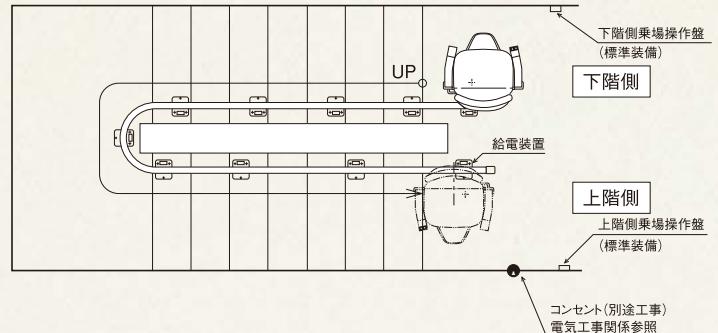

設置断面図(外回り)

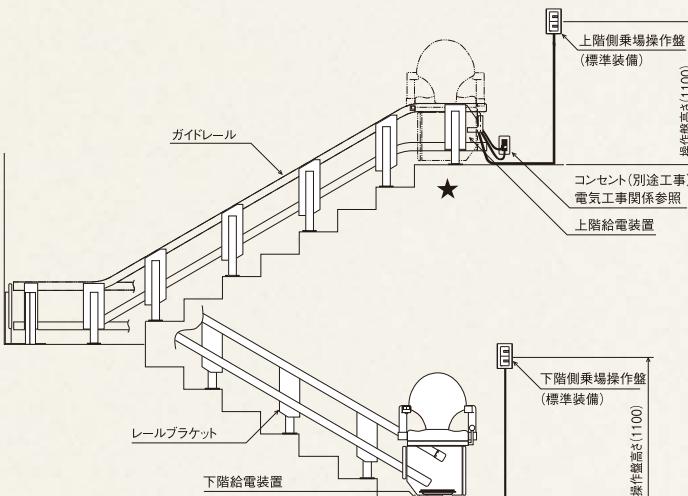

設置断面図(内回り)

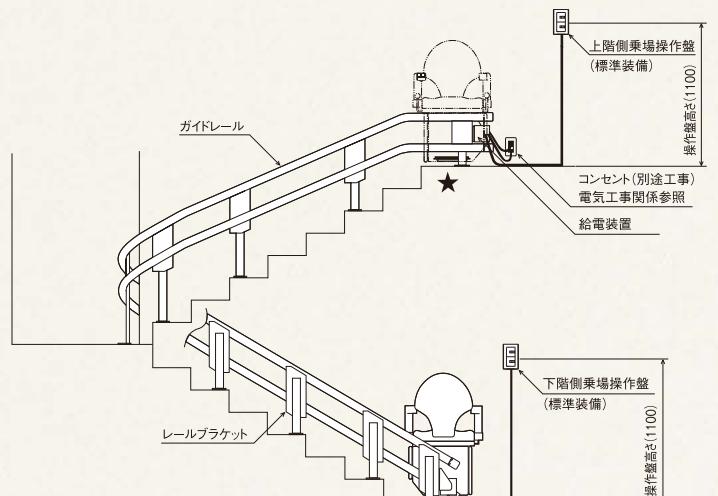

いす式階段昇降機「自由生活/曲線型スタンダード」仕様

定 員	1名(100kg)
速 度	6m/分
電 源	単相交流100V(50/60Hz)
モータ容量	200W
駆動用電源	充電式バッテリー
最大傾斜角度	55度
最小傾斜角度	0度(水平)
走 行 行 程	7m(標準)
駆 動 方 式	チェーンラックピニオン式
制 御 方 式	インバータ
レール 素 材	アルミ(アルマイト仕上げ)

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

標 準 装 置	回転シート(上階側のみ)60度 上下階乗場操作盤 速度切替スイッチ(2段階) パッテリー残量注意ランプ
安 全 装 置	巻き取り式安全ベルト、リミットスイッチ、ファイナルリミットスイッチ 着座スイッチ、電磁ブレーキ、キースイッチ、ニアフレームセーフティ 押し続けボタン、回転シートスイッチ、足置き台セーフティ、足置き台下セーフティ 過速度検出装置
オ プ シ ョ ン*	①乗場操作盤キースイッチ ②レール延長 ③人体感知センサー(フットライト) ④ベンダントスイッチ ⑤レバースイッチ ⑥補助バッテリー2倍仕様・3倍仕様 ⑦下階レールベンド ⑧途中階給電 ⑨走行中メロディ(乗場操作盤操作時) ⑩両回転レバー(回転角度50度) ⑪折り畳みレール ⑫ひじ掛けフラット仕様

※ 階段形状によっては対応できない場合がございます。ご計画の際はご相談下さい。
この他のオプションについては、ご要望に応じて検討いたします。


曲線型スタンダード仕様の特徴は7ページをご覧下さい。

踊り場のない
直線階段


ご家庭はもちろん学校・病院や駅などの公共施設の階段に設置できます。

■左記の図は、代表的な階段例です。
ご計画の際は、ご相談下さい。


正面図

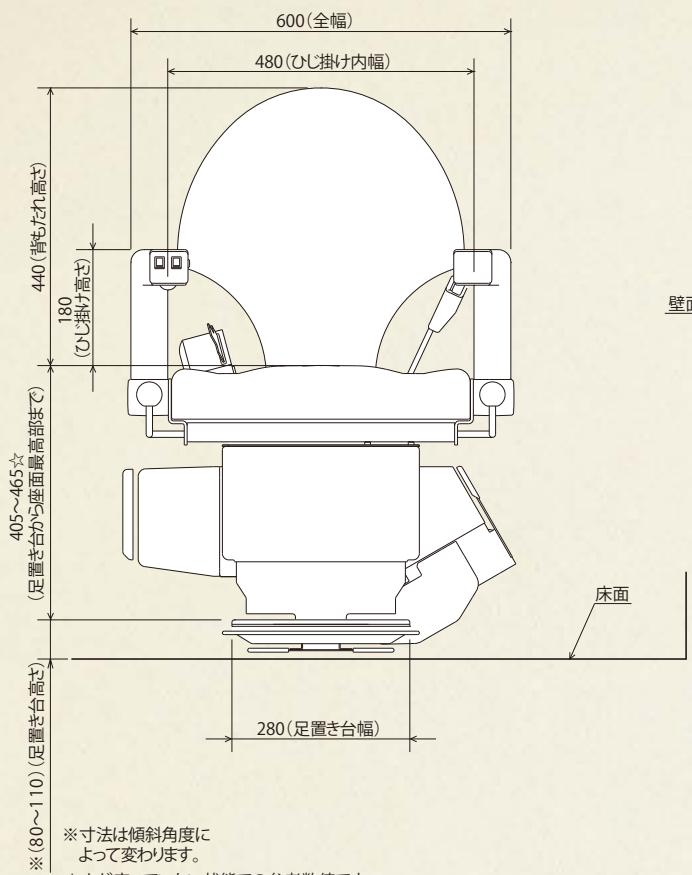

側面図

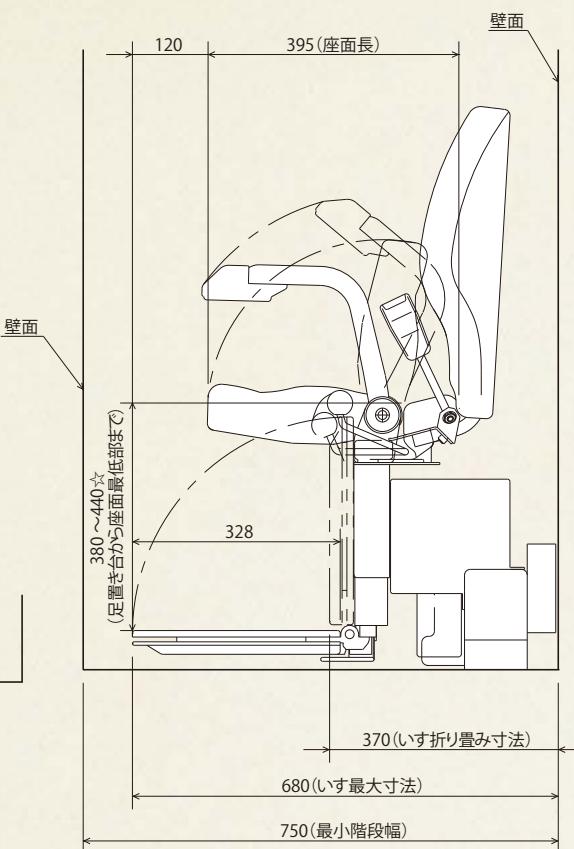

平面図

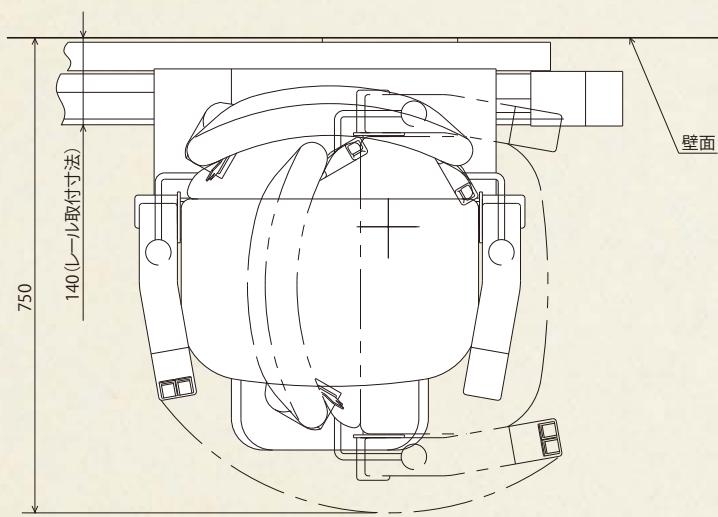

電気工事関係

[別途工事]

1) 電源(専用電源)


電圧・周波数	単相交流101±6V 50/60Hz
コンセント	ロック式接地防水コンセント
	125V 15A
	アースD種接地工事

専用コンセント施工例

コンセント埋込の場合

ロック式接地
防水埋込コンセント
125V15A

WF4100F
パナソニック電工
相当品

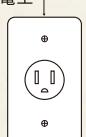

コンセント露出の場合


ロック式接地
防水露出コンセント
125V15A

WK4100F
パナソニック電工
相当品




2) 階段補強(強度不足の場合)

設置平面図

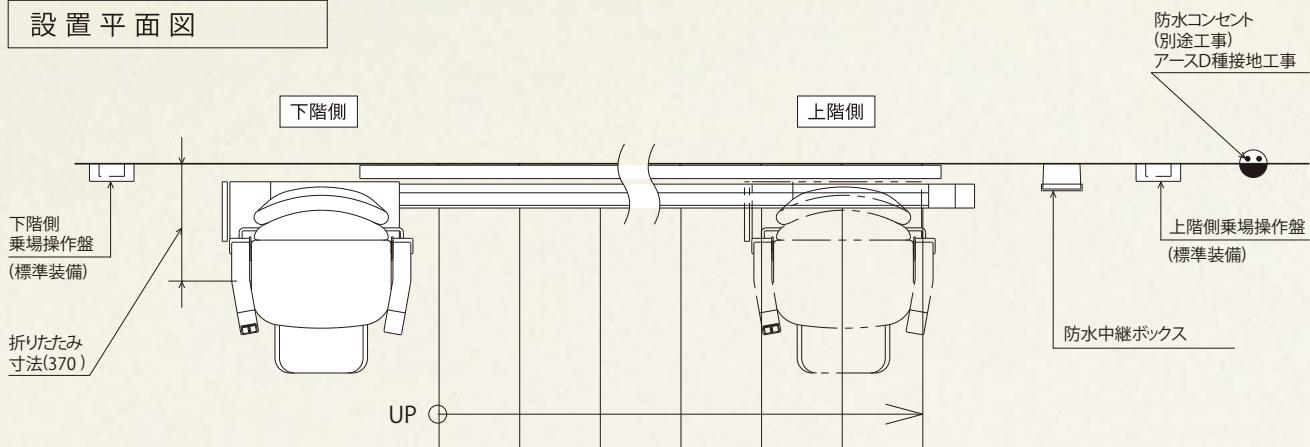

設置断面図

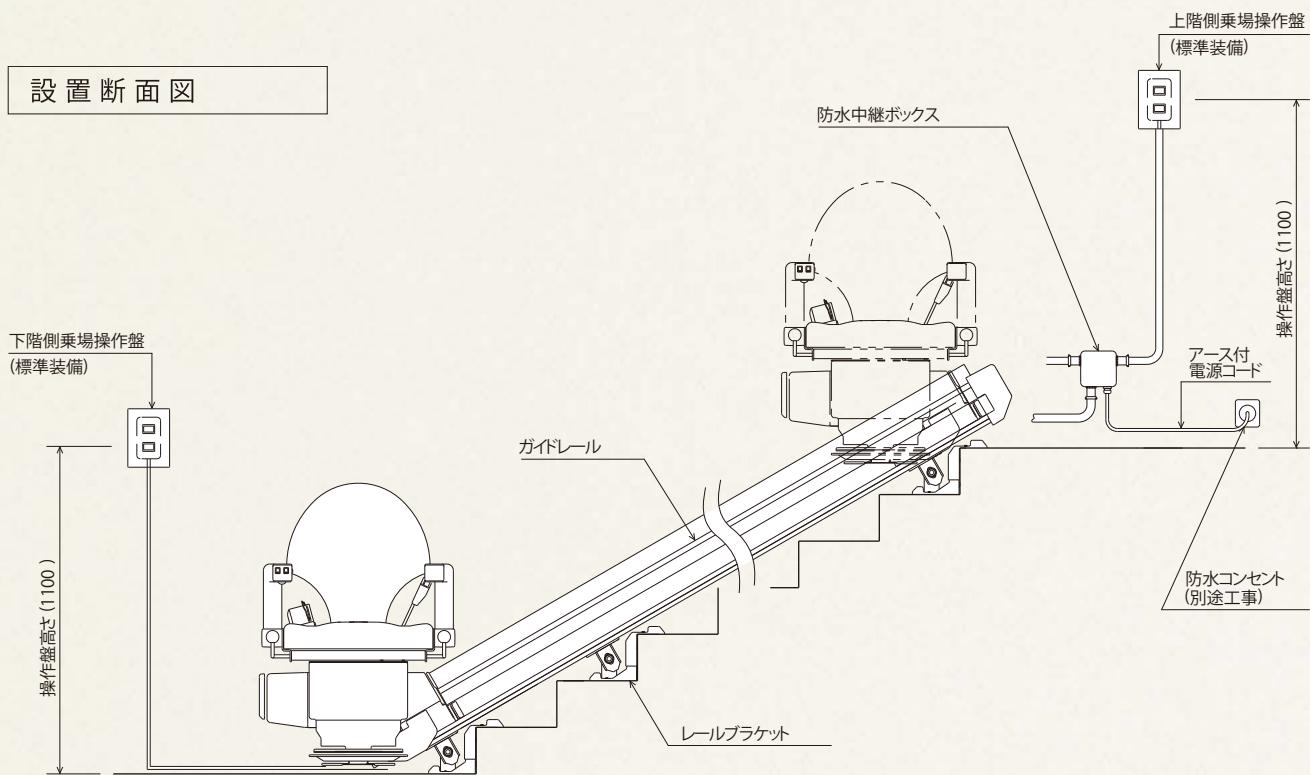

いす式階段昇降機「自由生活/屋外直線型」仕様

定 員	1名 (100kg)
速 度	6m/分 (回送時9m/分)
電 源	単相交流100V (50/60Hz)
モータ容量	200W
駆動用電源	——
最大傾斜角度	55度
最小傾斜角度	20度
走 行 行 程	5m (標準)
駆 動 方 式	チェーンラックピニオン式
制 御 方 式	インバータ
レール 材	アルミ (アルマイト仕上げ)

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

標 準 装 置	回転シート(上階側のみ) 60度と90度 上下階乗場操作盤 屋外カバー
安 全 装 置	巻き取り式安全ベルト、リミットスイッチ、ファイナルリミットスイッチ 着座スイッチ、電磁ブレーキ、キースイッチ、チアフレームセーフティ 押し続けボタン、回転シートスイッチ、足置き台セーフティ、足置き台下セーフティ 過速度検出装置
オプション*	①乗場操作盤キースイッチ ②レール延長 ③ペンダントスイッチ ④レバースイッチ ⑤ひじ掛けオプション

* 階段形状によっては対応できない場合がございます。ご計画の際はご相談下さい。
この他のオプションについては、ご要望に応じて検討いたします。


屋外直線型の特徴は8ページをご覧下さい。

ご家庭はもちろん学校・病院や駅などの公共施設の階段に設置できます。



■左記の図は、
代表的な階段例です。
ご計画の際は、
ご相談下さい。


正面図

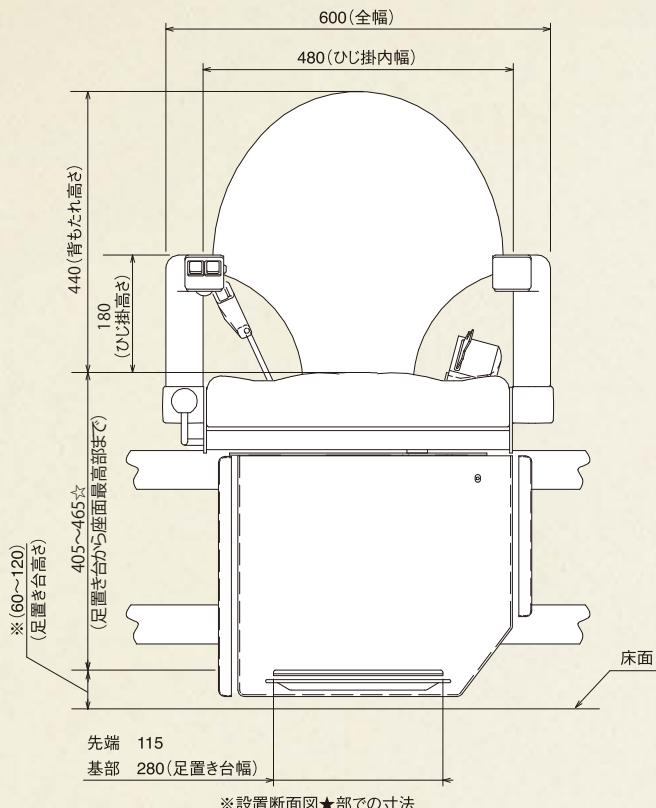


※設置断面図★部での寸法

☆人が座っていない状態での参考数値です。

側面図

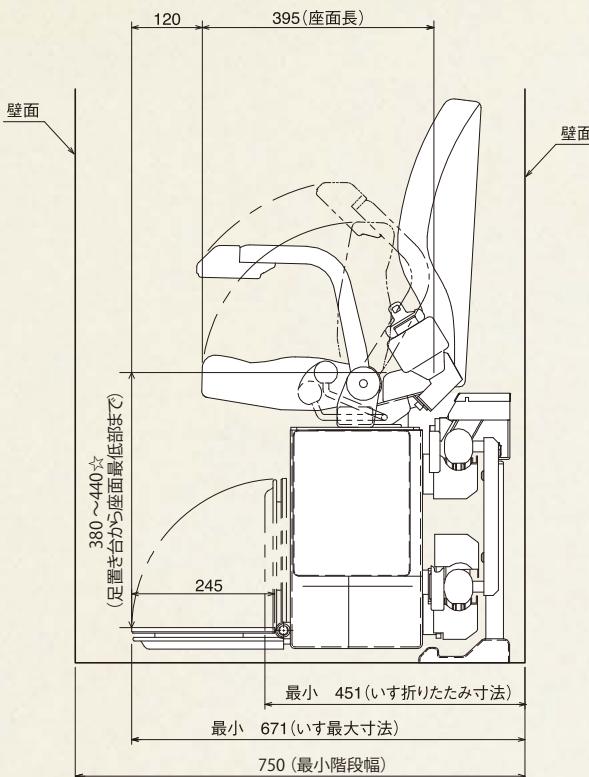

平面図

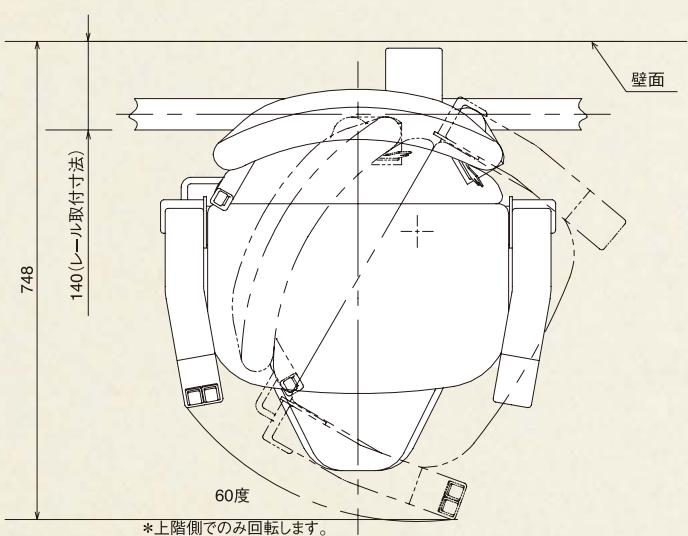

*上階側でのみ回転します。

電気工事関係

[別途工事]


1) 電源(専用電源)

電圧・周波数	単相交流101±6V 50/60Hz
コンセント	ロック式接地防水コンセント 125V 15A アースD種接地工事

専用コンセント施工例


コンセント埋込の場合

ロック式接地
防水埋込コンセント
125V15A
WF4100F
パナソニック電工
相当品

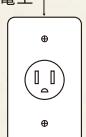


コンセント露出の場合

ロック式接地
防水露出コンセント
125V15A
WK4100F
パナソニック電工
相当品

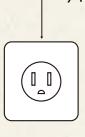


2) 階段補強(強度不足の場合)


設置平面図(外回り)

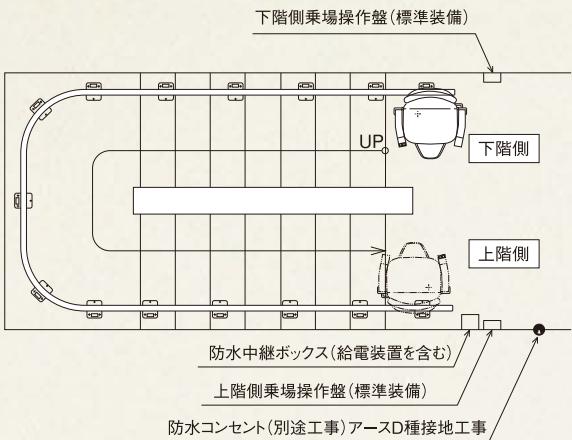


設置平面図(内回り)

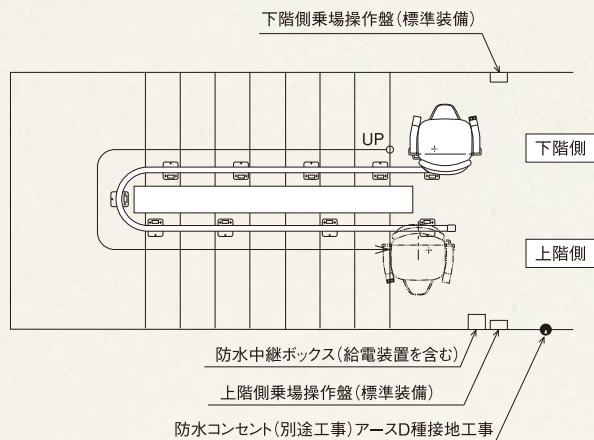

設置断面図(外回り)

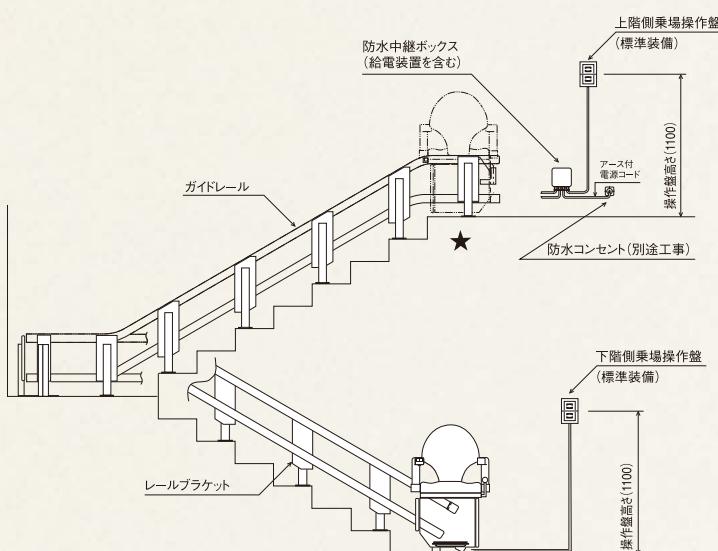

設置断面図(内回り)

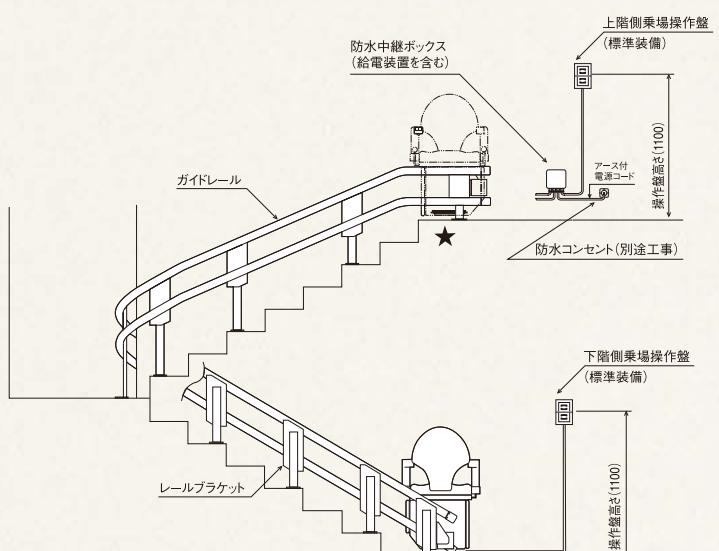

いす式階段昇降機「自由生活/屋外曲線型」仕様

定 員	1名(100kg)
速 度	6m/分
電 源	単相交流100V(50/60Hz)
モータ容量	200W
駆動用電源	充電式バッテリー
最大傾斜角度	55度
最小傾斜角度	0度(水平)
走 行 行 程	7m(標準)
駆 動 方 式	チェーンラックピニオン式
制 御 方 式	インバータ
レ ー ル 素 材	アルミ(アルマイト仕上げ)

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

標準装備

回転シート(上階側のみ)60度 上下階乗場操作盤
バッテリー残量注意ランプ 屋外カバー

安全装備

巻き取り式安全ベルト、リミットスイッチ、ファイナルリミットスイッチ
着座スイッチ、電磁ブレーキ、キースイッチ、チアフレームセーフティ
押し続けボタン、回転シートスイッチ、足置き台セーフティ
過速度検出装置(落下防止装置兼用)

オプション*

- ①乗場操作盤キースイッチ
- ②レール延長 ③ペンダントスイッチ ④レバースイッチ
- ⑤下階レールヘンド ⑥両回転レバー(回転角度50度)
- ⑦途中階給電 ⑧走行中メロディ(乗場操作盤操作時)

* 階段形状によっては対応できない場合がございます。ご計画の際はご相談下さい。
この他のオプションについては、ご要望に応じて検討いたします。

屋外曲線型の特徴は9ページをご覧下さい。

クマリフトの3つの約束

クマリフトでは、お客様に安全に、そして安心して商品をお使いいただけるように、商品開発からアフターサポートまできめ細やかなサービスを心がけています。



開発からメンテナンスまでの一貫体制。 全国ネットワーク&24時間365日サポート

商品お引き渡し後も24時間365日、年中休まずお客様のサポートを全国のサービスネットワークで対応。さらに定期的なメンテナンス契約(任意契約)もご用意し、末永く快適にお使いいただける商品を目指し、調整・点検も行っています。自社工場での開発・製造から販売・据付・メンテナンスまで一貫体制を敷き、信頼できる商品を目指しています。

不測の事態にも、24時間、迅速に対応いたします。

-  クマリフトに連絡をいただき、詳しい状況をお聞きし、初期対応をいたします。
-  24時間待機しているサービススタッフに連絡をとり、お客様のもとへ出発します。
-  できるだけ早く、安全・確実な復旧作業を行います。

製品の保証は、お引き渡し後1年間。

お引き渡し後1年間の保証をいたします。製品には万全の注意を払っておりますが、万一保証期間中に設計・製作上の問題や据付上の不備による故障が生じた場合は、無償で修理またはお取り替えいたします。ただし、次に該当する場合は、製品保証及び無償サービスの責任を負いかねます。

- ①定期点検の契約がなく、適切な給油、清掃、整備を行わないために起きた損傷及び故障。
- ②取り扱い上の不注意または不適切な使用や管理による損傷及び故障。
- ③不適切な使用で磨耗、劣化した部品を取り替える場合。
- ④クマリフト工務部及び弊社の全国サービスネットワーク以外で定期点検及び改造修理等を行った場合。
- ⑤天災地変等、不可抗力による損傷及び故障。

すべての「あっ、危ない」を防ぐ技術力。

座ってはじめて操作できる「着座スイッチ」や、障害物にあたると感知して停止する「障害物感知スイッチ」、昇降中や安全装置作動時に音楽や音声でお知らせする「走行中メロディ＆音声ガイド機能」など、安全対策を心がけた製品開発を行っています。



使う人とご家族の視点に立った製品づくり。

1979年にいす式階段昇降機を日本で初めて販売した実績と信頼が多くのお客様にご評価いただいている。

お客様の声 『面倒くさくない』『一人でできた』簡単操作に大喜び！

2階に寝室があるため階段の昇り降りは欠かせません。しかし、購入前は『使い方がわからないんじゃないかな』という機械操作の不安から設置に消極的でしたが、娘の『いざ必要になったときにはもう遅いよ』という言葉に納得。実際に使用すると、その簡単さにびっくり。今では階段の昇り降りでひざに不安を感じるときや、しんどいときに使わせてもらっています。

お客様の声 座り心地とインテリア性に大満足！今では一日10往復の大活躍。

子供の頃負ったケガのため、介護認定で『要介護1』を受け、階段の昇り降りに不安を感じて1階中心の生活となっていました。そんなとき、「自由生活」を付けているお宅に伺ったのがきっかけで購入を決めました。人間工学に基づいた快適な座り心地や、室内とマッチしたインテリア性にも大満足。今では一日に10往復の大活躍で、快適な生活を送っています。

公的援助

住宅改修の助成

障がい分野の給付

自由生活は住宅改修による助成(一部自治体)や、障がい分野の給付など、公的援助を受けることも可能です。(※介護保険制度は適用外です。)※詳しくは弊社までご相談下さい。

 クマリフト株式会社

大阪本社 〒550-0003
大阪府大阪市西区京町堀1-12-20

tel. 06-6445-6700
fax. 06-6445-6780

九州支店 〒810-0074
福岡県福岡市中央区大手門1-5-8 アークビル大手門2F

tel. 092-739-7760
fax. 092-739-7761

東京支店 〒110-0015
東京都台東区東上野3-35-9 本池田ビル

tel. 03-3839-1500
fax. 03-3839-1611

石川工場 〒923-0061
石川県小松市国府台5-26(小松市東部産業振興団地)

tel. 0761-47-4778
fax. 0761-47-4544

東北支店 〒984-0011
宮城県仙台市若林区六丁の目西町1-18

tel. 022-288-6000
fax. 022-288-0800

札幌営業所 〒003-0871
北海道札幌市白石区米里一条3-1-1

tel. 011-871-7441
fax. 011-871-7446

静岡営業所 〒422-8066
静岡県静岡市駿河区泉町9-14 ウエル・プレミアード1F

tel. 054-280-7700
fax. 054-280-7701

青森営業所 〒038-0003
青森県青森市大字石江字江渡117-18

tel. 017-782-7242
fax. 017-766-4810

名古屋営業所 〒456-0013
愛知県名古屋市熱田区外土居町9-14トキワ土居ビル305号

tel. 052-683-4601
fax. 052-683-4602

八戸出張所 〒031-0081
青森県八戸市柏崎1-19-1

tel. 0178-45-8734
fax. 0178-44-2801

北陸営業所 〒920-0343
石川県金沢市歓田中3-556

tel. 076-266-1981
fax. 076-266-1977

秋田営業所 〒010-0802
秋田県秋田市外旭川字三後田207

tel. 018-868-3531
fax. 018-868-3541

福井営業所 〒910-0854
福井県福井市御幸1-19-25 澤崎ビル1F

tel. 0776-26-3562
fax. 0776-22-1086

盛岡営業所 〒020-0862
岩手県盛岡市東仙北2-4-15

tel. 019-635-3521
fax. 019-635-3571

京都営業所 〒602-8151
京都府京都市上京区智恵光院通丸太町上ル西院町747-32

tel. 075-801-3388
fax. 075-801-3380

山形営業所 〒990-2477
山形県山形市長苗代56-1

tel. 023-645-6347
fax. 023-645-7524

大阪営業所 〒550-0003
大阪府大阪市西区京町堀1-12-20

tel. 06-6445-1011
fax. 06-6445-1012

仙台営業所 〒984-0011
宮城県仙台市若林区六丁の目西町1-18

tel. 022-288-6000
fax. 022-288-0800

神戸営業所 〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通2-1-4

tel. 078-251-2395
fax. 078-251-2703

郡山営業所 〒963-8835
福島県郡山市小原田3-2-5

tel. 024-941-3501
fax. 024-943-3515

岡山営業所 〒700-0975
岡山県岡山市北区今5-13-36 菊ビル2F

tel. 086-246-0431
fax. 086-246-0437

北関東営業所 〒330-0841
埼玉県さいたま市大宮区東町1-54 雄飛堂ビル4F

tel. 048-646-0515
fax. 048-645-8579

広島営業所 〒732-0066
広島県広島市東区牛田本町1-10-24 牛田グリーンビル

tel. 082-228-5344
fax. 082-221-9846

宇都宮出張所 〒320-0072
栃木県宇都宮市若草4-10-10-103

tel. 028-305-5273
fax. 028-624-0403

四国営業所 〒760-0073
香川県高松市栗林町2-16-14 三好ビルパークヒルズ1F

tel. 087-862-9777
fax. 087-862-9818

前橋出張所 〒371-0842
群馬県前橋市下石倉町23-12 キベビル 102号

tel. 027-898-2690
fax. 027-254-3100

福岡営業所 〒810-0074
福岡県福岡市中央区大手門1-5-8 アークビル大手門2F

tel. 092-739-7760
fax. 092-739-7761

茨城営業所 〒305-0821
茨城県つくば市春日4-5-7 クラモチ春日マンション1F

tel. 029-852-0780
fax. 029-852-0881

北九州出張所 〒802-0085
福岡県北九州市小倉北区吉野町5-20-101

tel. 093-921-6602
fax. 093-921-6604

千葉営業所 〒260-0022
千葉県千葉市中央区神明町13-1 神明ビル

tel. 043-242-7502
fax. 043-246-2891

長崎営業所 〒850-0004
長崎県長崎市下西山町13-31 奥園ビル1F

tel. 095-832-6767
fax. 095-832-6768

東京営業所 〒110-0015
東京都台東区東上野3-35-9 本池田ビル

tel. 03-3839-1500
fax. 03-3839-1611

大分営業所 〒870-0822
大分県大分市大道町5-2-25 伊藤ビル3階

tel. 097-573-5280
fax. 097-573-5288

横浜営業所 〒221-0822
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-9-10

tel. 045-322-1744
fax. 045-324-1472

熊本営業所 〒861-8035
熊本県熊本市東区御領2-28-14 大森ビル御領201

tel. 096-349-7231
fax. 096-349-7232

新潟営業所 〒950-0913
新潟県新潟市中央区鎌3-12-37

tel. 025-241-4602
fax. 025-241-9662

宮崎営業所 〒880-0916
宮崎県宮崎市大字恒久5027 ルネッサンスコープ1階

tel. 0985-50-2205
fax. 0985-50-2206

長岡出張所 〒940-2121
新潟県長岡市喜多町1050-5 丸山ビル2F

tel. 0258-28-3695
fax. 0258-28-3288

鹿児島営業所 〒890-0061
鹿児島県鹿児島市天保山町15-25 天保山ビル101

tel. 099-214-3804
fax. 099-214-3805

長野営業所 〒380-0903
長野県長野市鶴賀54-4 エルシービル

tel. 026-227-7450
fax. 026-227-8731

沖縄営業所 〒901-2103
沖縄県浦添市仲間1-30-9-1-C

tel. 098-874-4350
fax. 098-874-4340

長野中信出張所 〒399-0746
長野県塩尻市大門並木町8-17 小野ビル

tel. 0263-53-4150
fax. 0263-53-4151

■ クマリフトホームページアドレス
<https://www.kumalift.co.jp/>

 0120-07-0570
(9時～17時土・日・祝を除く)

上記の所在地・電話番号などは変わることがあります。その際はご容赦願います。

電話番号はご確認の上おかけ下さい。

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

クマリフトは、いす式階段昇降機「自由生活」のほか

●小型エレベーター ●ダムエレベーター

●荷物用(ロープ式)


●段差解消機「バーチベーター」

などのメーカーとして、福祉機器分野にいたるまで幅広く省力化、合理化に貢献しています。



クマリフトは、品質保証に関する
ISO(国際標準化機構9000シリーズ)

認証取得昇降機メーカーです。

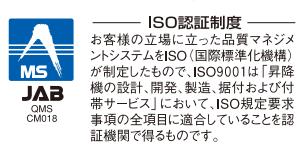

お客様の立場に立った品質マネジメントシステムをISO(国際標準化機構)が制定したものです。ISO9001は「昇降機の設計、開発、製造、据付および付帯サービス」において、ISO規定要求事項の全項目に適合していることを認証機関で得るものです。

19.09.10.000-33

系列販売店はISOの認証範囲外です。

